


# バードブラキニードル


Bard BrachyStar BrachyTherapy Needles

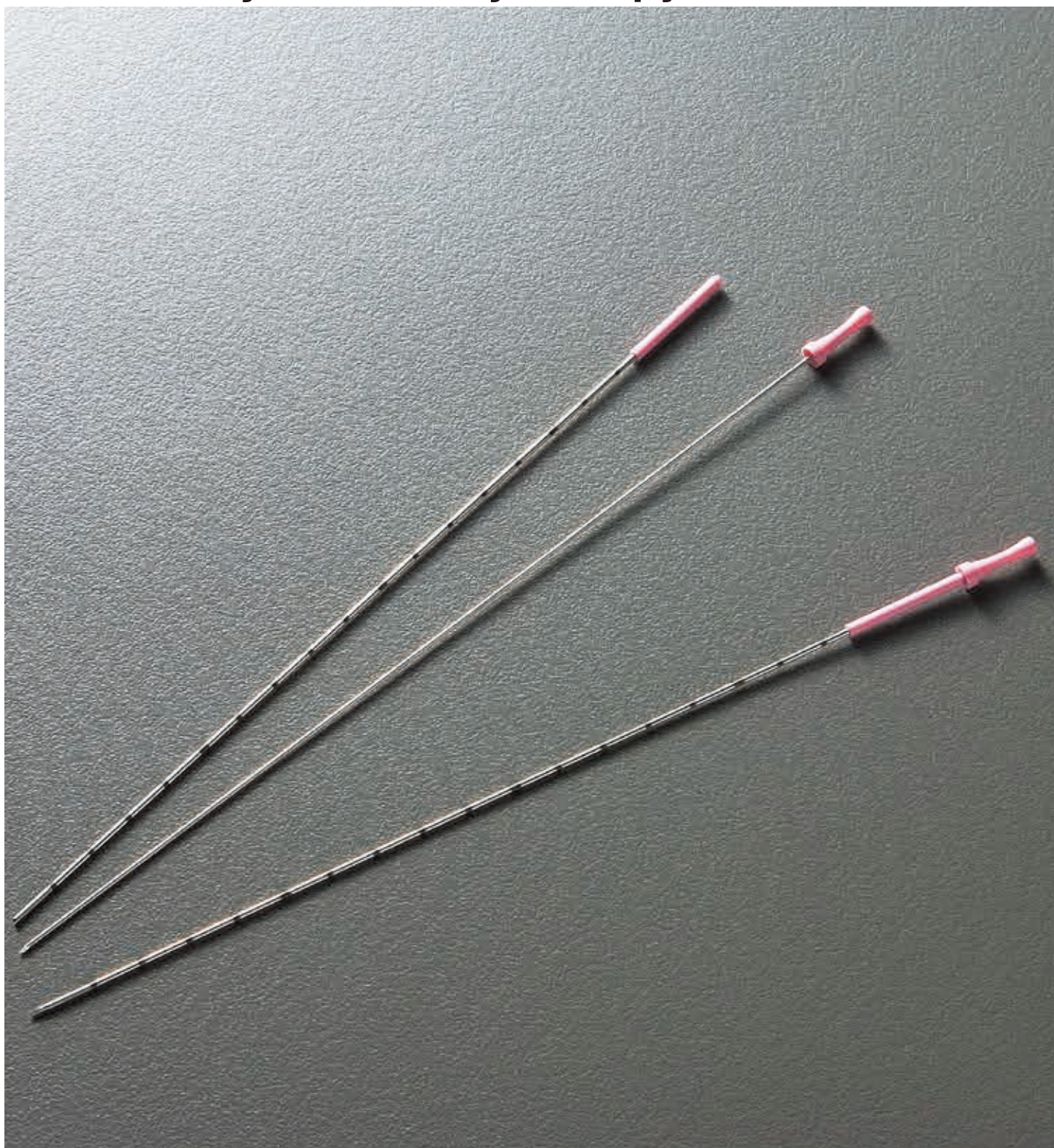

バードブラキニードルは先端形状に設計されたスタイレット(針)とカニューラで構成されています。

シード線源のアプリケーターからカニューラ内部への移動を容易にするよう、アプリケーターに接続するカニューラ開口部は外に向かって開く“フレアー”型になっています。

また、スタイレットとカニューラの段差を抑えた先端形状は刺入を容易にします。

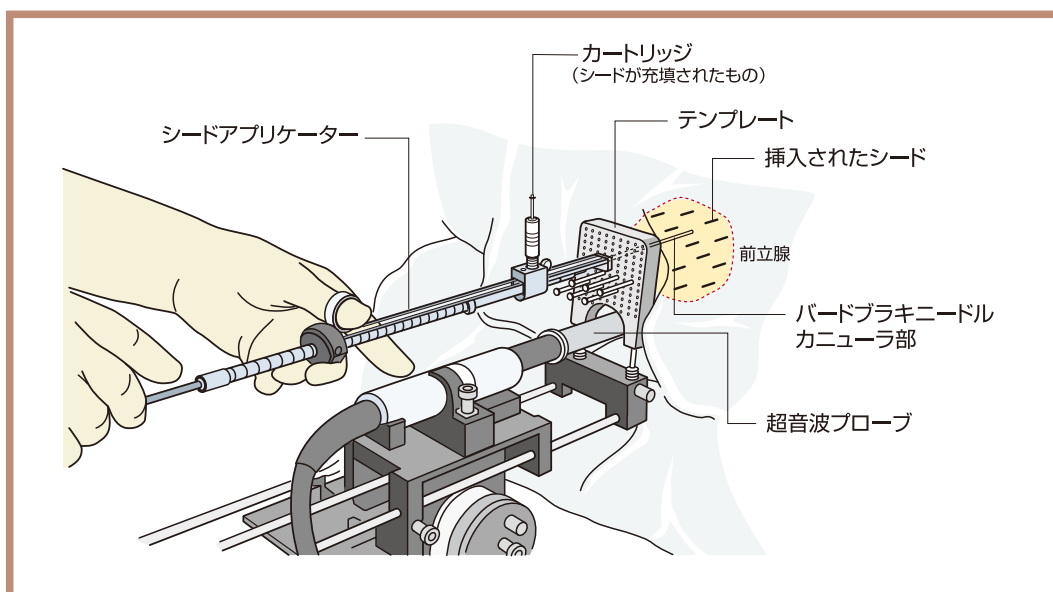

本製品は、米国Mick Radio-Nuclear Instruments社製のシード刺入装置(シードアプリケーター 200-TP他)に接続して使用する専用ニードルです。穿刺後、スタイレットを抜きし体内に残ったカニューラをシードアプリケーターのニードルレセプターに接続してください。カニューラ部の全長は、20cmでシードアプリケーターの機能に対応しています。

#### ORDERING INFORMATION

販売名：バードブラキニードル		
カタログ番号	規 格	包装単位
918201	18G 20cm長	10入
918205	18G 20cm長	50入 (5入×10)

承認番号：21700BZY00120000  
一般的名称：ブラキセラビー穿刺セット

※シードアプリケーターのご使用方法につきましては、シードアプリケーターの添付文書をご覧ください。

※事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用ください。

※本製品の添付文書は、弊社WEBサイト及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※Bard、バードは、C. R. Bard社の登録商標です。

※シードアプリケーターは、(株)メディコンの登録商標です。

製造販売業者

**Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.**



**株式会社 メディコン**

本 社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)  
(平野町センチュリービル9F)  
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)  
(平野町センチュリービル4F)  
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)  
(合和上野ビル8F)  
札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762  
静岡 ☎054(254)6191 名古屋 ☎052(722)4373  
金沢 ☎076(234)2202 高松 ☎087(837)4175  
広島 ☎082(924)7277 福岡 ☎092(526)6677  
熊本 ☎096(384)7733

■代理店