

SMOOTH OPERATIONS

胃瘻バルーンカテーテル  
スムーズボタン

# 胃瘻バルーンカテーテル スムーズボタン

●スタイレット

スムーズなカテーテル交換  
スタイレットに沿わせて胃内への  
カテーテル挿入も行えます。

●テーパークットされた  
バルーン先端

スムーズなカテーテル挿入

カテーテル先端をテーパークットしており、  
挿入時にかかる瘻孔への  
負担を軽減します。

スムーズな栄養剤投与  
フィーディングチューブ及び  
カテーテル接続部は  
大口径に設計されているため、  
高粘度栄養剤や薬剤投与時の  
注入抵抗を軽減します。

# SMOOTH OPERATIONS

## ORDERING INFORMATION

販売名:胃瘻バルーンカテーテル(スムーズボタン)

カタログ番号	シャフト外径	シャフト長	推奨容量	包装単位
ME1415	4.7mm (14Fr)	15mm	4mL	1入
ME1420		20mm		
ME1425		25mm		
ME1430		30mm		
ME1435		35mm		
ME1615	5.3mm (16Fr)	15mm	5mL	1入
ME1620		20mm		
ME1625		25mm		
ME1630		30mm		
ME1635	35mm	10mL	1入	
ME1815	15mm			
ME1820	20mm			
ME1825	25mm			
ME1830	30mm			
ME1835	35mm			
ME1840	40mm			
ME1845	45mm			
ME2015	6.7mm (20Fr)	15mm	10mL	1入
ME2020		20mm		
ME2025		25mm		
ME2030		30mm		
ME2035		35mm		
ME2040		40mm		
ME2045	45mm			
ME2425	8.0mm (24Fr)	25mm	10mL	1入
ME2430		30mm		
ME2435		35mm		
ME2440		40mm		
ME2445		45mm		

販売名:胃瘻バルーンカテーテル(フィーディング・減圧チューブ[ブルーチューブタイプ])

カタログ番号	仕様	包装単位
ME0010	フィーディング・減圧チューブ[ブルーチューブタイプ](L字型)	5入
ME0020	フィーディング・減圧チューブ[ブルーチューブタイプ](ストレート型)	5入
<b>NEW</b> ME0030	フィーディング・減圧チューブ[ブルーチューブタイプ](ストレート型8cm)	5入


認証番号:221ADBZX00031000

クラス分類:[2] 管理医療機器

一般的名称:短期的使用胃瘻栄養用チューブ

対応製品:胃瘻バルーンカテーテル(スムーズボタン)全製品

これまでの2種類のフィーディングチューブ(有効長280±20mm)に加え、  
チューブ部分の短いタイプ(有効長80±5mm)を追加しました。

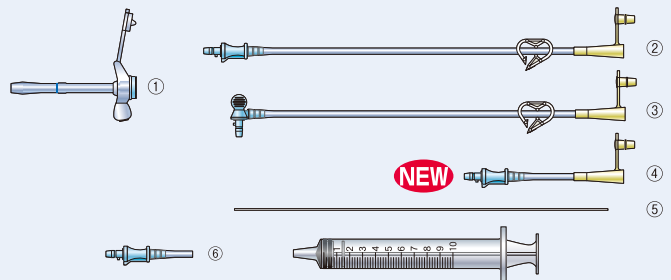

●内容物

- ①スムーズボタン
- ②フィーディング・減圧チューブ  
[ブルーチューブタイプ](ストレート型)
- ③フィーディング・減圧チューブ  
[ブルーチューブタイプ](L字型)
- ④フィーディング・減圧チューブ  
[ブルーチューブタイプ](ストレート型8cm)
- ⑤スタイレット
- ⑥アダプタ(逆止弁開口用)
- その他:10mLシリンジ、ガーゼ

認証番号:221ADBZX00031000

一般的名称:短期的使用胃瘻栄養用チューブ

償還区分:胃瘻カテII

クラス分類:[2] 管理医療機器

※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
※事前に必ず添付文書を読み使用上の注意等を守って正しくご使用ください。

製造販売業者

**富士システムズ株式会社**

販売業者

**株式会社 メディコン**

本社 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6541(代)  
(平野町センチュリービル9F)  
大阪営業所 大阪市中央区平野町2丁目5-8 ☎06(6203)6770(代)  
(平野町センチュリービル4F)  
東京営業所 東京都台東区上野5丁目6-10 ☎03(5812)3511(代)  
(台和上野ビル8F)

札幌 ☎011(281)7422 仙台 ☎022(295)6762  
名古屋 ☎052(722)4373 広島 ☎082(924)7277  
福岡 ☎092(526)6677

http://www.medicon.co.jp  
http://www.peg.gr.jp(PEG専用ページ)

代理店